



DEFLUSSORI PER UROLOGIA E ARTROSCOPIA

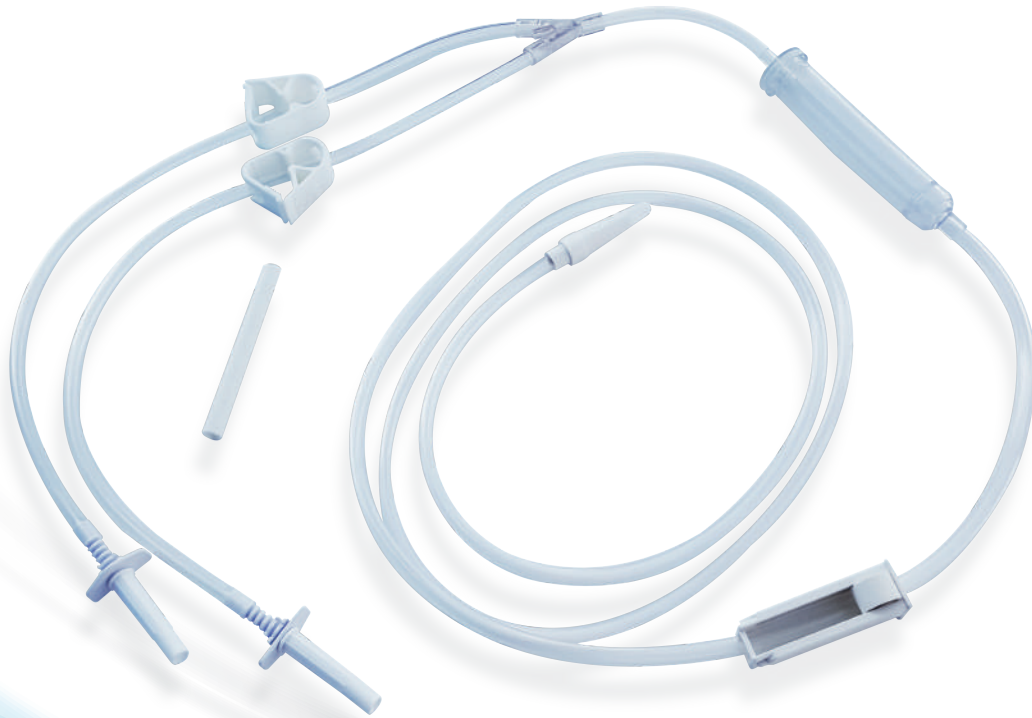

- Tubo con ampio lume
- Perforatori ad alto flusso
- Connessioni terminali universali

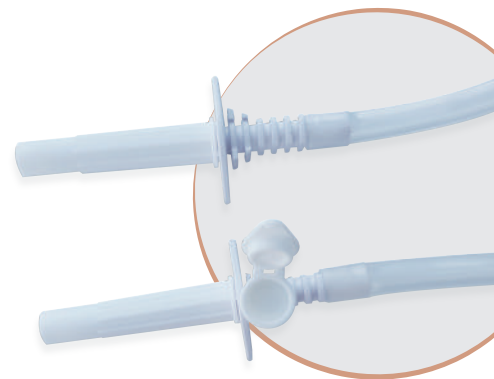

DEFLUSSORI PER UROLOGIA E ARTROSCOPIA

I deflussori Bioservice, grazie all'ampino lume interno dei tubi, assicurano un grande flusso di portata durante il lavaggio urologico, durante le procedure di cistoscopia e di artroscopia. Bioservice realizza deflussori su specifica richiesta del cliente disponendo di varie tipologie di componentistica come :

- 1 ► Perforatori senza filtro da utilizzare solamente per contenitori non rigidi in cui lo svuotamento non necessita di un apporto di aria dall'esterno
- 2 ► Perforatori con filtro che consentono un deflusso di liquidi da tutti i tipi di contenitori : per le bottiglie rigide in vetro aprire il tappo di chiusura del filtro, per le sacche in plastica non rigide il tappo può rimanere chiuso
- 3 ► Regolatori di flusso di varie dimensioni che permettono di avere un ottimo controllo della portata del liquido.
- 4 ► Gocciolatori di varie dimensioni che permettono di verificare la velocità del flusso
- 5 ► Coni cateteri terminali ad attacco universale provvisti di tubo in silicone per connessioni particolari
- 6 ► Raccordi luer terminali che consentono un attacco pratico e sicuro ad artroscopi o cistoscopi e una maggiore maneggevolezza dovuta al tubo in silicone su cui sono inseriti.

i dispositivi sono forniti in confezione sterile ETO.

DEFLUSSORI PER UROLOGIA TUBO 150 cm

CODICE	MODELLO	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
H90760E	1-VIA	- 1 perforatore senza filtro con capsula protettiva - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva - tubetto in silicone	50 pz
H90770E	2- VIE	- 2 perforatori senza filtro con capsula protettiva - 2 clamp stringitubo - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva - tubetto in silicone	40 pz
H90780E	3- VIE	- 3 perforatori senza filtro con capsula protettiva - 3 clamp stringitubo - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva	30 pz

DEFLUSSORI PER UROLOGIA TUBO 250 cm

CODICE	MODELLO	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
H90761E	1- VIA	- 1 perforatore senza filtro con capsula protettiva - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva	40 pz
H90771E	2- VIE	- 2 perforatori senza filtro con capsula protettiva - 2 clamp stringitubo - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva	40 pz
H90781E	3- VIE	- 3 perforatori senza filtro con capsula protettiva - 3 clamp stringitubo - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva	30 pz

DEFLUSSORI PER ARTROSCOPIA

CODICE	MODELLO	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
H90970E	2-VIE	- 2 perforatori con filtro e capsula protettiva - 2 piastrelle stringitubo - gocciolatore - roller - cono catetere terminale con capsula protettiva - tubetto in silicone	25 pz
H90980E	2-VIE	- 2 perforatori senza filtro con capsula protettiva - 2 clamp stringitubo - gocciolatore - spezzone terminale in silicone con clamp multiscatto - raccordo luer lock maschio con capsula protettiva	25 pz

