






SET POUR LAVAGE UROLOGIE AND ARTHROSCOPIE



- Tube avec large lumen
- Perforateurs haut flux
- Raccordement des bornes universelles

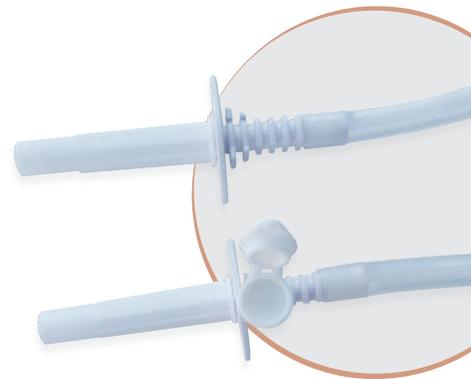

SET POUR LAVAGE UROLOGIE ET ARTHROSCOPIE

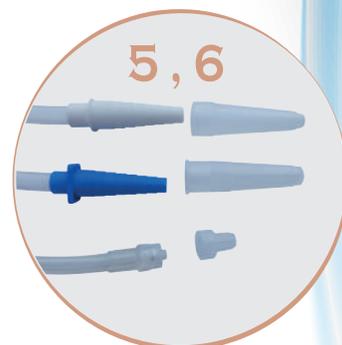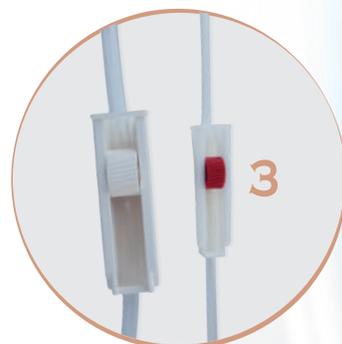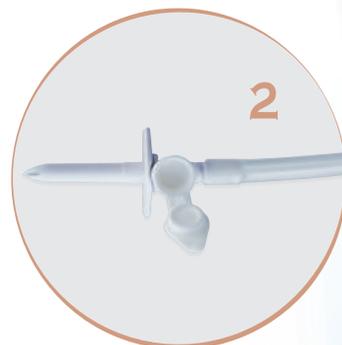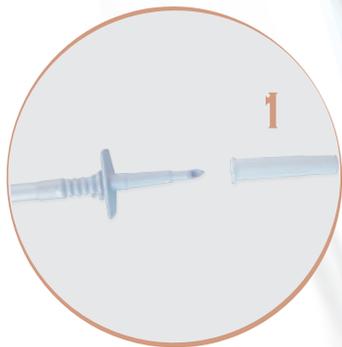

Ensembles de lavage de Bioservice, grâce au large lumen interne des tubes, assurent des débits élevés pendant les procédures de lavage, cystoscopie et arthroscopie urologiques.

Bioservice fabrique des ensembles de lavage sur demande spécifique du client, et dispose de plusieurs types de composants disponibles, il s'agit notamment de:

- 1 ▶ Perforateurs sans filtre doit être utilisé que pour des réceptacles non rigides où le drainage ne nécessite pas de prise d'air extérieure.
- 2 ▶ Perforateurs avec filtre qui permet l'écoulement de liquides à partir de tous les types de conteneurs: pour les bouteilles de verre rigides ouvrir le bouchon du filtre, pour les sacs en plastique non rigide le bouchon peut rester fermé.
- 3 ▶ Les régulateurs de flux de divers dimensions permettent un contrôle parfait de la vitesse d'écoulement du liquide.
- 4 ▶ chambres d'égouttement dans différentes dimensions qui permettent une vérification facile de la vitesse d'écoulement.
- 5 ▶ cônes cathéter bornes avec connecteurs universels équipés d'un tube de silicone pour les connexions spéciales.
- 6 ▶ connecteurs Terminal Luer qui permettent la fixation pratique et sécurisé à l'arthroscopies ou le cystoscopes et manipulation facile en raison de tube de silicone dans lequel ils sont insérés

SET POUR LAVAGE UROLOGIE 150 cm TUBE			
CODE	MODELE	COMPOSITION	EMBALLAGE
H90760E	1-VOIE	- 1 Perforateur sans filtre avec bouchon de protection - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal - Tube de silicone	50 pcs
H90770E	2-VOIES	- 2 Perforateurs sans filtre avec bouchon de protection - 2 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal - Tube de silicone	40 pcs
H90780E	3-VOIES	- 3 Perforateurs sans filtre avec bouchon de protection - 3 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal - Tube de silicone	30 pcs
SET POUR LAVAGE UROLOGIE 250 cm TUBE			
CODE	MODELE	COMPOSITION	EMBALLAGE
H90761E	1-VOIE	- 1 Perforateur sans filtre avec bouchon de protection - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal	40 pcs
H90771E	2- VOIES	- 2 Perforateurs sans filtre avec bouchon de protection - 2 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal	40 pcs
H90781E	3-VOIES	- 3 Perforateurs sans filtre avec bouchons de protection - 3 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal	30 pcs
SET POUR LAVAGE ARTHROSCOPIE			
CODE	MODELE	COMPOSITION	EMBALLAGE
H90970E	2- VOIES	- 2 Perforateurs sans filtre avec bouchon de protection - 2 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Pince à roulette - Conne cathéter terminal - Tube de silicone	25 pcs
H90980E	2- VOIES	- 2 Perforateurs sans filtre avec bouchon de protection - 2 clamps - Cuvette assemblée (égouttage) - Calmp gm blanc à plusieurs clic - Connecteur mâle Luer-lock avec bouchon de protection	25 pcs