

KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI




TORACENTESI


- Pratico sistema di valvole unidirezionali
- Disponibile in varie configurazioni
- Ampia gamma di aghi

PARACENTESI

- Disponibile con sacche di varie capacità
- Ago cannula atraumatico

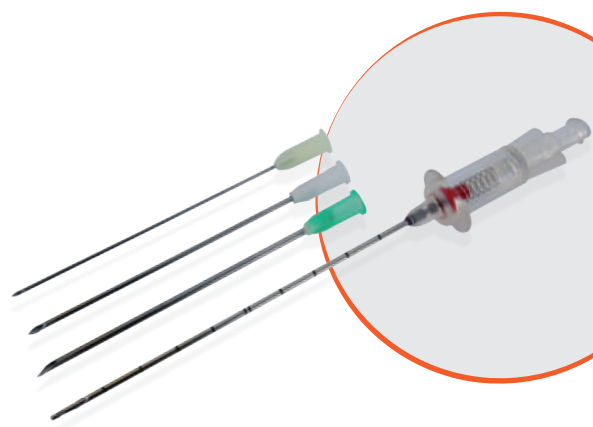

KIT PER TORACENTESI

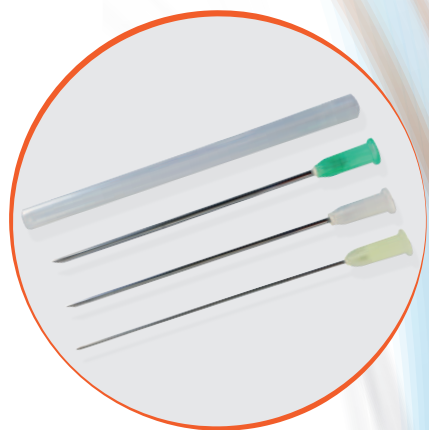

Il dispositivo viene utilizzato per l'aspirazione dell'essudato pleurico. Il kit contiene tutto il necessario per l'esecuzione della toracentesi (aghi, siringa e sacca di raccolta).

Il set per aspirazione possiede un'elevata versatilità di utilizzo in quanto disponibile con diversi modelli di aghi che si differenziano per dimensioni e caratteristiche operative.


- Triade di aghi da 55 mm disponibili nei diametri 14G, 16G e 19G
- Triadi di aghi da 80 mm disponibili nei diametri 14G, 16G e 19G
- Ago di Veress con punta retrattile atraumatica.



Il dispositivo "TORAMATIC" consente un'aspirazione sicura in quanto dotato di valvole unidirezionali che evitano reinfusioni nel paziente del liquido aspirato.

In sostituzione alla versione "TORAMATIC" Bioservice dispone della versione "TORASET" dotata di un rubinetto a tre vie ad alta tenuta con indicatori di direzione del fluido aspirato e successivamente scaricato nella sacca.

Il dispositivo è fornito in confezione sterile ETO.

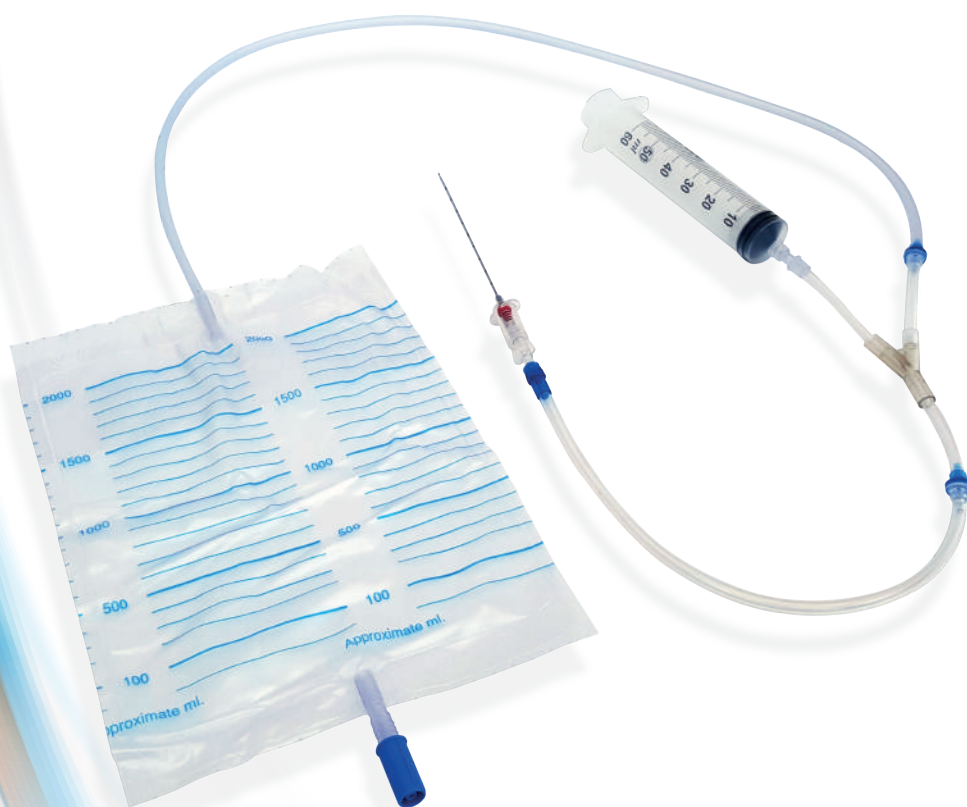

KIT PER PARACENTESI



Il dispositivo viene utilizzato per l'aspirazione del liquid ascitico. Il kit contiene tutto il necessario (aghi, siringa e sacca di raccolta). Il set é disponibile con sacche graduate di diversa capacità.

- Sacca da 2 it (modello PARASET 2)
- Sacca da 5 it (Modello PARASET 5)
- Sacca da 8 it (modello paraset 8)
- Sacca da 12 it (modello paraset 12)

Tutte le sacche sono dotate di valvola antireflusso e di rubinetto di scarico

Il dispositivo é dotato di un rubinetto a tre vie ad alta tenuta con indicatori di direzione del fluido aspirato e successivamente scaricato nella sacca.

« PARASET » contiene un ago cannula che rende la procedura di paracentesi meno traumatica per il paziente. Dopo la perforazione e la successiva estrazione della cannula metallica interna, la flessibilita del catetere che rimane inserito nel paziente evita qualsiasi tipo di trauma interno.

Il catere riassume la conformazione originale anche dopo accidentali piegature impedendo ostruzioni per il passaggio del liquido di scarico. Su richiesta del cliente sono disponibili aghi cannula con dimensioni diverse.

Il kit puo essere realizzato anche con l'ago di veress.

Il dispositivo é fornito in confezione sterile ETO.



KIT PER TORACENTESI E PARACENTESI



KIT PER TORACENTESI			
CODICE	MDELLO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
H9200E	TORASET 1-55	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H9201E	TORASET 1-80	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H9202E	TORASET 1-VER	- ago di Veress da 100 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H9203E	TORASET 2-55	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt	30 pz
H9204E	TORASET 2-80	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt	30pz
H9205E	TORASET 2-VER	- ago di Veress da 100 mm - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt	30pz
H92001E	TORAMATIC 1-55	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm - 2 valvole unidirezionali - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H92011E	TORAMATIC 1-80	- triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm - 2 valvole unidirezionali - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H92021E	TORAMATIC 1-VER	- ago di Veress da 100 mm - 2 valvole unidirezionali - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30pz

KIT PER PARACENTESI			
CODICE	MDELLO	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE
H92120E	PARASET 2	- ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 2 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	30 pz
H92160E	PARASET 5	- ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 5 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	20 pz
H92200E	PARASET 8	- ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 8 lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	20 pz
H92240E	PARASET 12	- ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G - rubinetto a tre vie - siringa da 60 ml - sacca di scarico da 12lt con valvola antireflusso e rubinetto di scarico	15 pz